

CyanoViewSmart

「スマホ」で蛍光ゲル撮影



※スマートフォンは本システムに付属しません。

WSE-5640 CyanoViewSmart

スマホで蛍光ゲル撮影可能 (^^)V

安全なシアン LED 光源

折りたたんでコンパクトに保管



透過型の青緑色（シアン）LED 光源に、折り畳み式の View Window（オレンジフィルター付き）を装備しました。

ゲルからの「バンド切出し」も可能です。

遮光ボックスを装着し、View Window からスマートフォンやデジカメで蛍光染色ゲルを撮影可能です。

W：13cm × H：8cm までのゲルが対象です。

収納時

使用時




付属品



WSE-5640 CyanoViewSmart



遮光ボックス

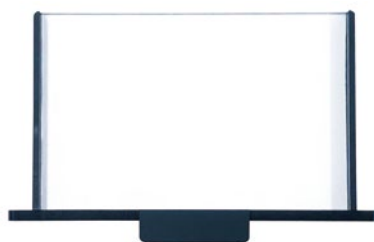

ゲルトレイ



ACアダプター

SPECIFICATION

型式・名称	WSE-5640 CyanoViewSmart
光源	透過型 LED光源 ピーク波長：505nm 半値幅：±25nm
照射範囲	130×80mm (ガラス面135×92mm)
発光強度	500μW (発光面中央)
のぞき窓	オレンジフィルター
外形寸法	収納時：225(W)×220(D)×75mm(H) 使用時：225(W)×220(D)×195mm(H)
質量	1.6kg
電源	DC24V 0.5A
ACアダプター	入力 AC100V 50/60Hz 50VA 出力 DC24V 1A
製品構成	WSE-5640 CyanoViewSmart本体×1台、遮光ボックス×1個、ゲルトレイ×1個、ACアダプター×1個、取扱説明書
環境温度	20℃～30℃
商品コード	2008160
価格	220,000円

対象蛍光色素 (代表的なもの)

核酸用	エチブロ (EtBr)
	EzFluoroStain DNA (ATTO)
	EzPreStain DNA&RNA (ATTO)
	SYBR Safe
	SYBR Gold
	SYBR Green I
タンパク質用	GelRed
	FluoroVue
	ミドリグリーンエクストラ
	EzLabelFluoroNeo (ATTO)
	SYPRO Ruby
	SYPRO Orange
	SYPRO Tangerine
	Coomassie Fluor Orange
	Oriole蛍光ゲルステイン
	Flamingo蛍光ゲルステイン
Pro-Q Diamond	
Phos-Tag Magenta	
Phos-Tag Aqua	

※ 2022年4月現在。試薬の詳細は販売元へご確認ください。
※ 上記試薬の検出を保証するものではありません。



アトー株式会社

生化学・分子生物学・遺伝子工学研究機器
開発/生産/販売/サービス

主要製品

- 発光・蛍光イメージングシステム
- 画像解析ソフトウェア ●電気泳動装置
- 電気泳動関連試薬 ●ウエスタンブロット試薬
- ペリスタポンプ ●細胞培養・観察システム

- 東京本社 〒111-0041 東京都台東区元浅草3-2-2 ☎(03)5827-4861(代表) ☎(03)5827-6647
- 大阪支店 〒530-0044 大阪市北区東天満2-8-1 ☎(06)6136-1421(代表) ☎(06)6356-3625
若杉センタービル別館 5F
- 技術開発センター 〒110-0016 東京都台東区台東2-21-6 ☎(03)5818-7560(代表) ☎(03)5818-7563
◆メンテナンスサービスグループ ☎(03)5818-7567(代表) ☎(03)5818-7563

■URL <https://www.atto.co.jp/> お問い合わせ WEB会員登録の上お問い合わせフォームをご利用ください。