

仕様・価格



WSC-2900
WEB サイト

型式・名称	WSC-2900 ローテーター atto
回転数	10 ~ 80rpm
アングル調整範囲	0°~ 90°
タイマー	1 ~ 9999min
ターンテーブル (オプション)	A : 50mL コニカルチューブ× 10 本 B : 15mL コニカルチューブ× 18 本 C : 1.5mL エッペンチューブ× 64 本 E : 50mL × 10 本 / 15mL × 10 本 / 1.5mL × 30 本 ※積層ホルダーを使用して 2 段重ね可能
電源	AC100V 50/60Hz 35W
寸法	206 (W) × 260 (D) × 300mm (H)
質量	4.5kg (本体のみ)
使用環境	4℃~ 45℃ (結露なきこと)

各部名称と寸法



価格

商品コード	型式・名称	数量	価格
4002900	WSC-2900 ローテーター atto (Rotator atto)	1 台	88,000 円
4002940	ターンテーブル (WSC-2900 用) A	1 個	26,800 円
4002941	ターンテーブル (WSC-2900 用) B	1 個	26,800 円
4002942	ターンテーブル (WSC-2900 用) C	1 個	26,800 円
4002944	ターンテーブル (WSC-2900 用) E	1 個	26,800 円
4002949	積層ホルダー (WSC-2900 用)	1 個	9,800 円

Tabletop small volume rotary mixer (卓上小型小容量回転混合器)

WSC-2900 ローテーター atto (Rotator atto)

50ml conical tube
15ml conical tube
1.5ml eppendorf tube



Speed : 10 ~ 80rpm
Timer : 1 ~ 9999min
Angle : 0 ~ 90°

アトー株式会社

主要製品
●発光・蛍光イメージングシステム
●画像解析ソフトウェア ●電気泳動装置
●電気泳動関連試薬 ●ウエスタンブロット試薬
●ペリスタポンプ ●細胞培養・観察システム

生化学・分子生物学・遺伝子工学研究機器
開発/生産/販売/サービス

■東京本社 〒111-0041 東京都台東区元浅草3-2-2 ☎(03)5827-4861(代表) ☎(03)5827-6647
■大阪支店 〒530-0044 大阪市北区東天満2-8-1 ☎(06)6136-1421(代表) ☎(06)6356-3625
若杉センタービル別館 5F

■技術開発センター 〒110-0016 東京都台東区台東2-21-6 ☎(03)5818-7560(代表) ☎(03)5818-7563
◆メンテナンスサービスグループ ☎(03)5818-7567(代表) ☎(03)5818-7563

■URL <https://www.atto.co.jp/> お問い合わせ WEB会員登録の上お問い合わせフォームをご利用ください。 2023.9



2023 年価格改定版

ローテーター atto

「ローテーター atto」は回転式のみキシング装置です。50mL/15mLのコニカルチューブ、1.5mLのエッペンチューブのみキシングが可能です。

主なみキシング用途

- ・DNA やタンパク質などサンプル抽出
- ・培養用みキシング
- ・免疫沈降

機能

- ・アングル角度調整：0～90°
- ・回転速度可変：10～80 rpm
- ・タイマー：1～9999min
- ・タイマー「0」：連続運転

ターンテーブルのアングル（角度）調整

ターンテーブルは垂直状態（0°）～水平状態（90°）まで角度調整が可能です。角度を変えることで、チューブ内の溶液を効率よく攪拌可能です。



ターンテーブルの2段重ね

積層ホルダーを使用すると、ターンテーブル A/B/C/E を2段重ねで使用できます。同時に複数のチューブを大量に回転させることが可能です。




オプション

ターンテーブルA

価格	26,800 円
チューブタイプ	50mL コニカルチューブ
最大本数	10 本

※バランスをとって使用してください。

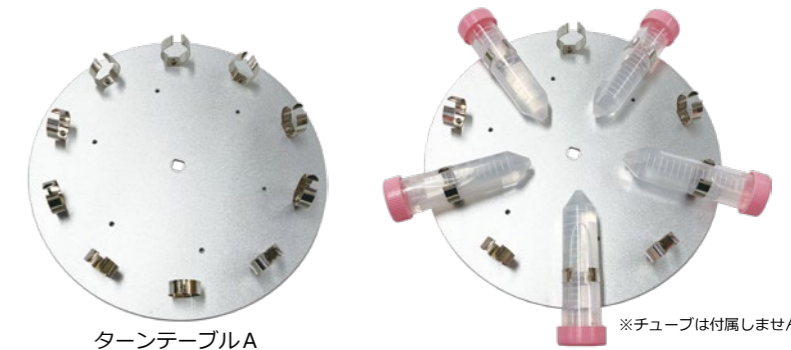


ターンテーブルA

※チューブは付属しません

ターンテーブルB

価格	26,800 円
チューブタイプ	15mL コニカルチューブ
最大本数	18 本

※バランスをとって使用してください。

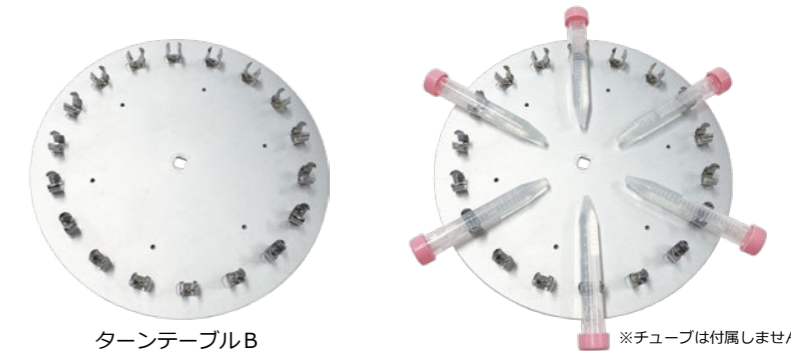

ターンテーブルB

※チューブは付属しません

ターンテーブルC

価格	26,800 円
チューブタイプ	1.5mL エッペンチューブ
最大本数	64 本

※バランスをとって使用してください。




ターンテーブルC

※チューブは付属しません

ターンテーブルE

価格	26,800 円
チューブタイプ	50mL コニカルチューブ 15mL コニカルチューブ 1.5mL エッペンチューブ
最大本数	50mL：10 本 15mL：10 本 1.5mL：30 本

※バランスをとって使用してください。

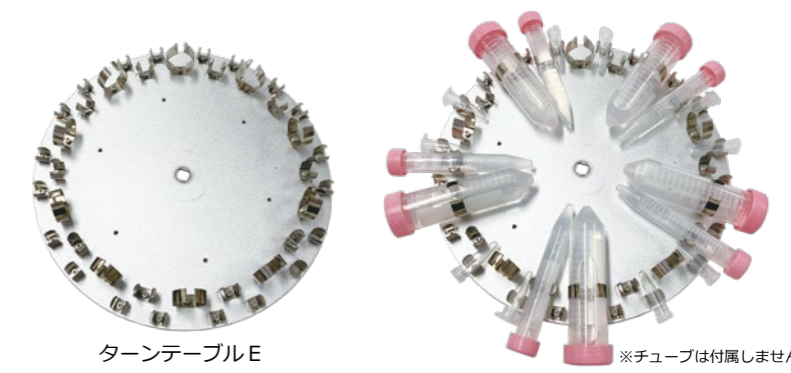


ターンテーブルE

※チューブは付属しません

積層ホルダー

価格	9,800 円
用途	ターンテーブルを2段重ねで使用するためのジョイントです。
ターンテーブル	ターンテーブル A/B/C/E 対応

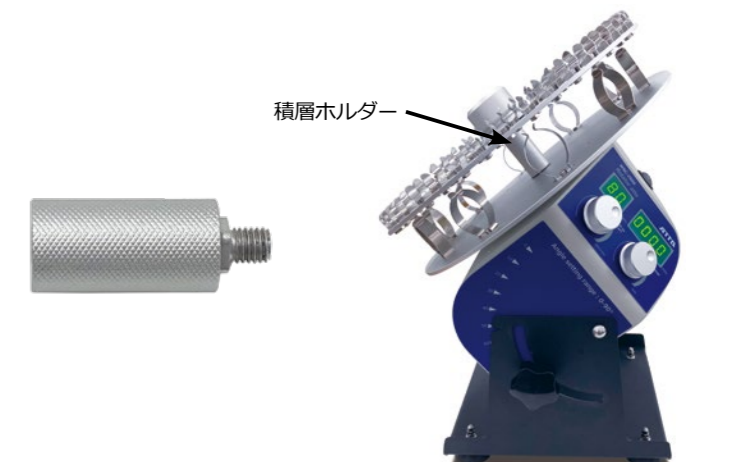

積層ホルダー